

# SYST'AM® P914L / UNIVERSAL-KISSEN

POSITIONIERUNG UND DEKUBITUS-PROPHYLAXE

## MATERIALIEN

80  
kg/m<sup>3</sup>



Visko  
Schaumstoff



Abnehmbarer  
Polymaille®  
Integralbezug



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Reinigung des Schaumstoffes:



(Nicht unter Wasser tauchen)


Pflege des POLYMAILLE® Bezuges:



## INDIKATIONEN

- Dekubitusprophylaxe und Positionierung des Kopfes.


HMV : 11.11.05.0XXX

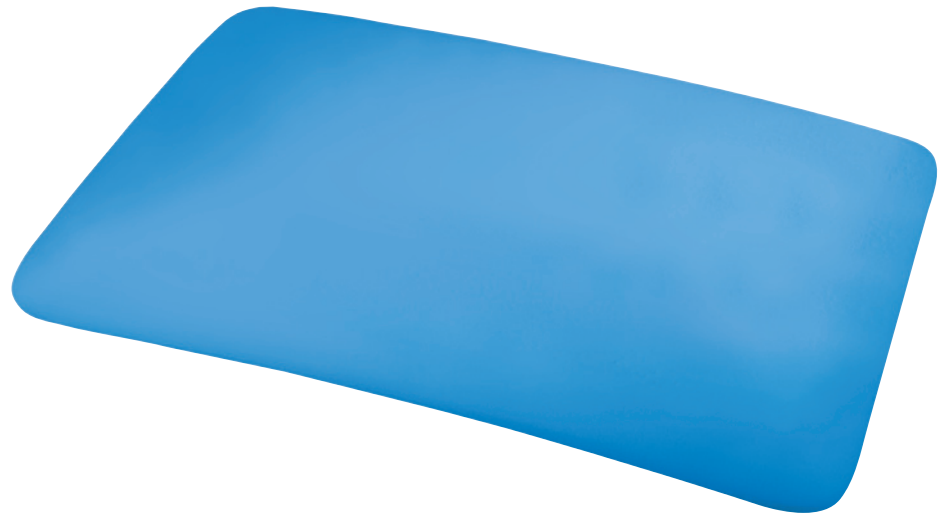

### VISKOELASTISCHER SCHAUMLSTOFF MIT FORMGEDÄCHTNIS


- Präzises Ausformung des Kopfes und Vergrößerung der Kontaktfläche des Körpers mit dem Kissen.
- Bessere Druckverteilung: Verminderung des Drucks bei Risikozonen, verbesserter Blutkreislauf.
- Erhöhter Komfort und stabile Lage des Patienten.

### VERFÜGBARE AUSFÜHRUNG

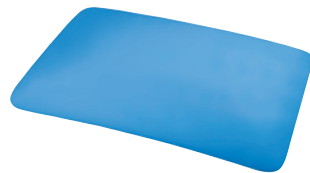

P914L / Universal-Kissen

- Das ist das universelle Lagerungshilfsmittel schlechthin: Als Hilfsmittel zur Positionierung des Patienten, zur Druckentlastung der Fersen, als Schutz der Innenseiten der Knie und der Fußgelenke, als Kopfkissen...
- Das Universalkissen kann auch als Lagerungshilfsmittel im Sessel, Rollstuhl oder Pflegerollstuhl.
- Erleichtert das Einsetzen durch das Pflegepersonal in erheblichem Maße.

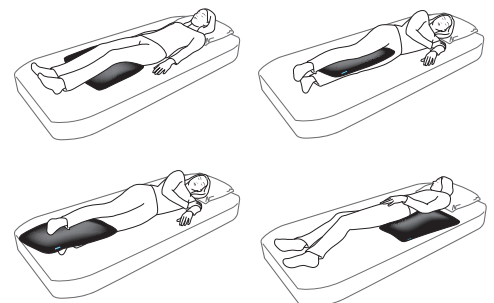

## BEZUGSEIGENSCHAFTEN

### BI-ELASTISCHER STOFF MIT EINER POLYURETHAN-BESCHICHTUNG

- Bekämpfung von Reibungs- und Scherkräften
- Geschmeidige und weiche Oberfläche.
- Begünstigt den Gasaustausch (Wasserdampf, Schweiß)
  - Begünstigung des Mikroklimas
- Waschbar bei 90°C, Desinfizieren mit kalt zu versprühenden Produkten
- Schwerentflammbar.
- Beim Wiedereinsatz für mehrere Patienten wird die Anschaffung von Ersatzbezügen empfohlen.



BEZEICHNUNG	PRODUKT-NR	GRÖßEN (L x W x H)
Universal-Kissen	P914L1HW	60 x 40 x 13 cm

