

SYST'AM® P951D / Das RÜCKENKISSEN

SPRITZGEFORMTES RÜCKENKISSEN AUS VISKOELASTISCHEM SCHAUMSTOFF MIT FORMGEDÄCHTNIS
NACH DEM MULTITRAGFÄHIGKEITSPRINZIP

MATERIALIEN

80
kg/m³



Visko
Schaumstoff



Abnehmbarer
atmungsaktiver
Bezug

Reinigung des Schaumstoffes:



(Nicht unter Wasser tauchen)

Reinigung Bezug:



INDIKATIONEN

Für Personen mit Haltungsdefizit in
Sitzposition:

Schädigungen des Zentralnervensystems (Apoplexie, Schädeltraumata),
Teilausfall des Nervensystems,
orthopädische Einschränkungen,
Vasomotorenlähmung, ...

- Verbesserte Positionierung im Stuhl
- Vermittelt der Sitzposition im Stuhl
- Verringert das Nach-Vorne-Rutschen
- Unterstützt die Linderung von Rückenschmerzen
- Schafft Druckentlastung an den Dornfortsätzen der Wirbelsäule



EIN UNIVERSALES BEFESTIGUNGSSYSTEM

→ Erlaubt die Anpassung des Rückenkissen an die meisten Rollstuhlmodelle.

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



P951D / Rückenkissen
Mit Bezug.



Therapeutische Combi-Packs
(S. 52)

BEZEICHNUNG	PRODUKT-NR	GRÖßEN (H x B x D)
SYST'AM® P951D	Small	P951DS1HW 44 x 39 x 9 cm
	Standard	P951DIHW 49 x 44 x 9 cm
	Large	P951DL1HW 49 x 50 x 10 cm



Gewährleistung



IST EINE MIT DEM KISSEN ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI DER PRÄVENTION VON DEKUBITUS ABSOLUT KOMPLEMENTÄRE VORRICHTUNG

- Entlastet in beachtlichem Maße die Stützpunkte des Wirbelbereichs.
- Vermindert aufgrund einer Verringerung der sagittalen Instabilität ("nach vorne Gleiten") das Risiko des Auftretens von Dekubitus im Kreuzbein-Steißbein-Bereich.
- Verringert dank eines besseren Halts die Reib- & Scherkräfte.

EINE SPEZIFISCHE ANATOMISCHE FORM

- Wahrt die sich aus einer Kyphose ergebende spezifische Rückenmorphologie.
- Wahrt die Wölbung der Lendenwirbelsäule, was ein wichtiger Haltungsfaktor ist.

ERHÖHTER KOMFORT DES PATIENTEN IM ROLLSTUHL

- Laterale Wülste zum Schutz gegen den Kontakt mit den Röhren.

BEZUG



- Laterale Wülste zum Schutz gegen den Kontakt der Röhren mit dem beim Einsatz häufig schmerzhaften Achsel-/Rückenbereich



- Ein universales Befestigungssystem erlaubt die Anpassung des Rückenkissen an die meisten Rollstuhlmodelle



- Sehr widerstandsfähiger technischer Stoff, der gegenüber den Bereichen mit starker Abrasionsbeanspruchung



VISKOELASTISCHER MULTITRAGFÄHIGER SCHAUMSTOFF MIT FORMGEDÄCHTNIS

- Trägt zur Übertragung der Risikostützbereiche auf Bereiche mit geringerem Risiko bei.

WEIßER SCHAUMSTOFF:

(geringere Tragfestigkeit) Erlaubt eine Freisetzung des Spitzendrucks des Rückenbereichs. Begünstigt die morphologische Abformung.

BLAUER SCHAUMSTOFF:

(erhöhte Tragfestigkeit) Erlaubt die Entlastung der Risikostützpunkte. Verstärkt die laterale Stabilität.




VERBESSERUNG DER POSITIONIERUNG UND STABILITÄT DES PATIENTEN


- Ein Abstützen des Beckengürtels ermöglicht es dem nach vorne Gleiten (sagittale Instabilität) und der Sturzgefahr vorzubeugen, beide stellen permanente Probleme in der häuslichen und professionellen Pflege dar.
- Seitliche Ränder verringern die bei behinderten Patienten häufig anzutreffende laterale Instabilität.





OHNE RÜCKENKISSEN

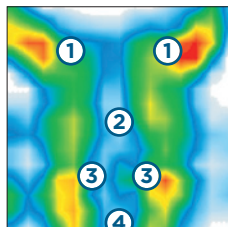

RÜCKENKISSEN EINFACHER SCHAUMSTOFF

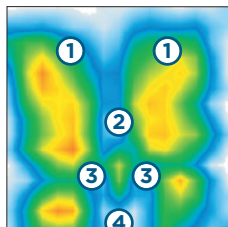

MIT SYST'AM®-RÜCKENKISSEN

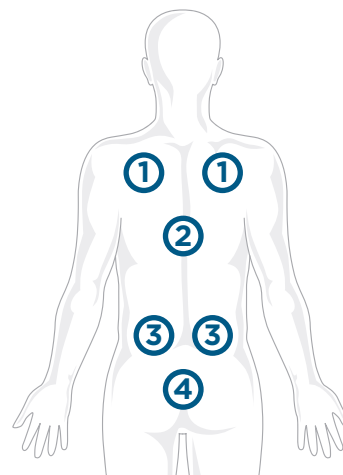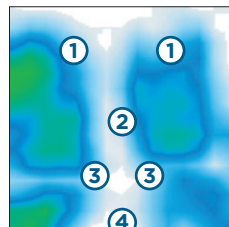


- ① SCHULTERBLÄTTER / SCHULTERN
- ② RÜCKENBEREICH
- ③ LENDENBEREICH
- ④ KREUZBEIN-STEIßBEIN-BEREICH

SYST'AM® THERAPEUTISCHE COMBI-PACKS FÜR DEN ROLLSTUHL


STELLEN SIE IHREN PACK SELBST ZUSAMMEN



1 Nehmen Sie die Sitzmaße auf Tiefe / Breite

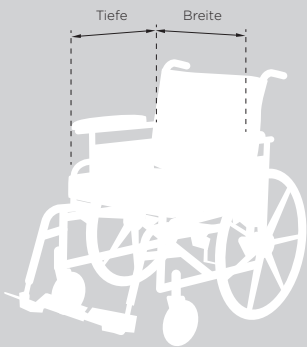


2 Wählen Sie die passende Größe aus

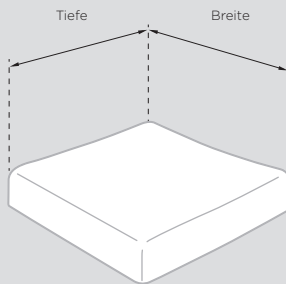

3 Wählen Sie das ausgesuchte Kissen in der passenden Größe aus




4 Bestimmen Sie die Rückenkissen Größe

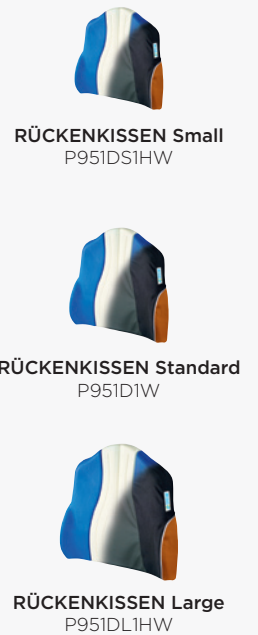








EMPFEHLUNGEN

→ Wählen Sie eine größere Sitztiefe (2-3 cm), wenn Sie ein Rückenkissen benutzen.

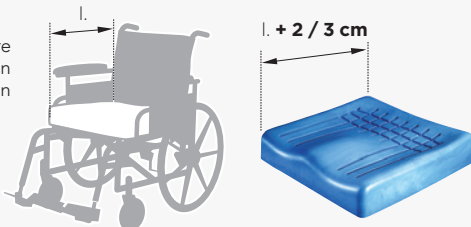

→ Das Rückenkissen immer auf das Kissen

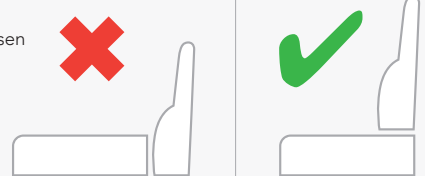

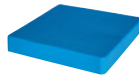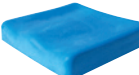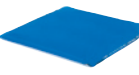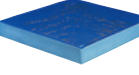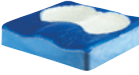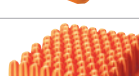ROLLSTUHL-BREITE (cm)		30/32		34/36		38		40 - 42				43/44		45 - 46				48/50		55		60		
VERFÜGBARE GRÖßEN (cm)		32 x 32 cm	36 x 36 cm	38 x 38 cm	38 x 43 cm	40 x 40 cm	40 x 43 cm	40 x 46 cm	42 x 42 cm	42 x 46 cm	42 x 50 cm	43 x 43 cm	43 x 46 cm	45 x 42 cm	45 x 43 cm	45 x 46 cm	45 x 50 cm	46 x 40 cm	46 x 46 cm	48 x 43 cm	51 x 46 cm	51 x 50 cm	56 x 46 cm	61 x 50 cm
ÜBERSICHTTABELLE «KISSENART/ GRÖßEN»																								
	P361CLX VISCO-FOAM Kissen					•			•			• 43 x 45 cm	• 43 x 48 cm		•					•				
	P371C HR-FOAM-Kissen								•					•		•					•			
	P311C SYST'AM GEL / SYST'AM DUOGEL®					•			•					•	•									
	P314C MIXTE					•									•									
	P341C DUOFORM®		•						•	•				•		•					•			
	P361C VISCOFLEX®		•	•		•			•	•				•		•				•	•	•		
	P361CP VISCOFLEX®+ mit Abduktionskeil								•					•		•								
	P361CA VISCOFLEX®+	•	•	•	•	•			•	•	•			•		•	•			•	•	•	•	•
	P361CR VISCOFLEX® AIR								•					•		•								
	P301C POLYAIR® 60 Zweikammer (•) Einkammer (•)		•			• •	•	•				• •	•					•	• •		•	•	•	•
	P302C POLYAIR® 100 Zweikammer (•) Einkammer (•)					• •	•	•				• •	•					•	• •		•	•	•	•
TABELLE DER ZUSAMMEN GEHÖRENDE GRÖßEN																								
	P951D RÜCKENKISSEN Small	+	+	+	+																			
	P951D RÜCKENKISSEN Standard		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
	P951D RÜCKENKISSEN Large								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			